





Racegel

Pleine puissance pour la préparation gingivale



RACEGEL EST LE SEUL GEL THERMO-GÉLIFIABLE QUI CRÉE UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET SEC POUR LA GESTION DE TOUTES VOS PRÉPARATIONS GINGIVALES

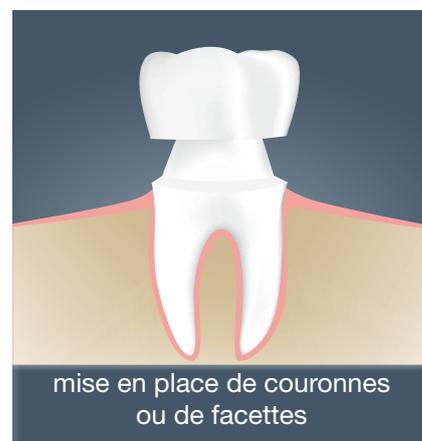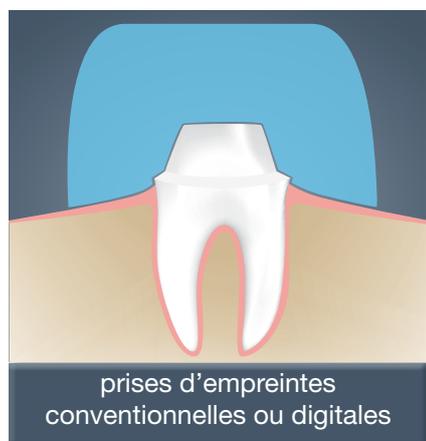

Effet astringent intégré

- **Contraction des tissus mous** grâce aux 25% de chlorure d'aluminium
- **Contrôle optimal du saignement sans coloration de la gencive**
- **Accès simplifié aux marges sous-gingivales**
- Des solutions hémostatiques spécifiques **ne sont pas nécessaires**
- Création d'un **environnement propre et sec**



Avant l'application de Racegel




Après l'application de Racegel: gencive propre et sèche

Préparation gingivale atraumatique

- **Du liquide au gel:** viscosité thermo-gélifiable unique
 - A température ambiante (20 °C), Racegel est liquide dans la seringue
 - La viscosité de Racegel augmente avec la température
 - Au contact des tissus buccaux (35 °C), la viscosité de Racegel augmente et devient immédiatement celle d'un gel

Evolution de la viscosité de Racegel avec la température

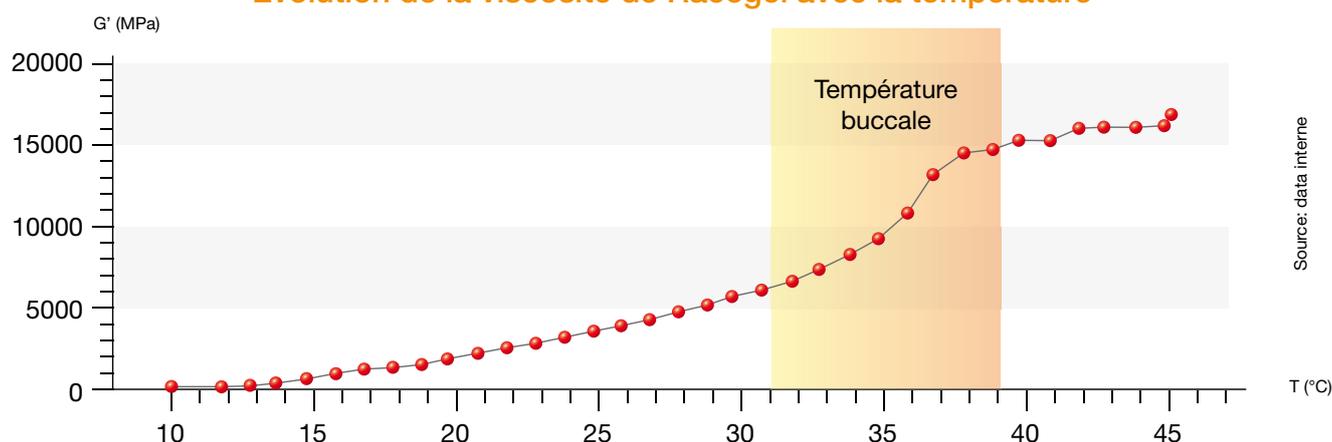

Placement facile, rapide et précis

- **Seringue prête à l'emploi** avec embouts fins pré-courbés
- **Insertion aisée du gel dans le sulcus**
- Le gel **ne se disperse pas et ne s'écoule pas** durant le placement
- **Visualisation facile du gel** grâce à sa couleur orange



Utilisation possible avec des fils de rétraction en cas de préparation sous-gingivale profonde

Rinçage rapide et sûr

- Viscosité thermo-gélfiable **réversible**
 - La viscosité de Racegel diminue lors du rinçage à l'eau froide
 - Rinçage facile et sans causer de nouveaux saignements



Déplacement minimal et cependant des empreintes de haute qualité




Rétraction minimale cependant suffisante pour l'enregistrement précis des limites cervicales pour à chaque fois obtenir des empreintes de haute qualité.

Racegel

La manière efficace de gérer toutes vos préparations gingivales

Racegel comparé aux pâtes de rétraction	Racegel comparé aux solutions hémostatiques	Racegel comparé aux fils de rétraction
Ne nécessite pas de solution hémostatique additionnelle	Reste en place. Ne s'étale pas et ne s'écoule pas	Est plus facile et plus rapide à mettre en place
Garantit des empreintes de haute qualité avec une rétraction gingivale minimale	Garantit des empreintes de haute qualité avec un minimum de rétraction gingivale	Garantit des empreintes de haute qualité avec un minimum de rétraction gingivale
Evite d'avoir besoin d'équipement spécifique	Absence de décoloration gingivale	Rinçage facile et sans causer de nouveaux saignements
Goût framboise pour le confort du patient	Offre un système d'application pratique prêt à l'emploi	Préserve l'intégrité de l'attache épithéliale

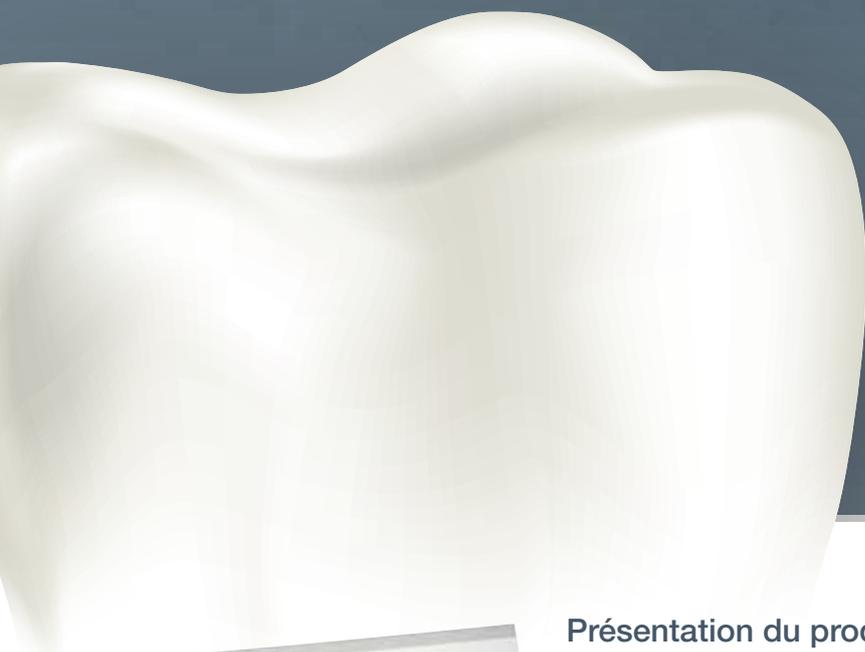

Présentation du produit

Disponible en:

- boîtes de trois seringues et 30 embouts pré-courbés

